



开启无痛抗衰新时代



开启无痛抗衰新时代

为什么选择Liberté?

最先进的单极射频设备
直接接触冷却探头设计

-  非侵入式皮肤紧致与轮廓塑形治疗
-  单次治疗即可收获显著效果
-  搭载直接接触冷却系统有效抑制疼痛
-  恢复时间短
-  效果持久



Liberté



- » 拥有6.78MHz频率的单极射频设备
- » 手柄设计更符合人体工学:重量轻&体积小
- » 用户界面设计简洁直观
- » 卫生安全的一次性探头
- » 通过探头尖端嵌入的微型制冷装置实现强力直接冷却
- » 强效冷却技术,带来舒适治疗体验(能量范围:面部探头 71~133J,眼部探头 12J~24J,身体探头:119J~203J)

技术

DCC™直接接触冷却技术

通过直接接触冷却技术冷却皮肤表面


世界首创独家专利技术,采用了创新热力学设计的单极射频设备。

Liberté 探头搭载了直接接触冷却 (DCC™) 技术,通过冷却皮肤表面,有效降低射频治疗过程中的疼痛。由于疼痛程度降低,治疗时可以使用更高等级的能量进行施术,从而获得更好的治疗效果。


其他的常规高能量单级射频治疗,通常会使用氮气制冷技术来冷却皮肤表面,这种冷却方式需要极为复杂的操作程序,且制冷能力十分有限。

DCC™技术采用了创新热力学设计,在探头尖端嵌入微型制冷装置,通过热传导的方式对探头与皮肤接触的部分进行直接冷却。

该项技术专利由Asterasys Co., Ltd.独家所有。

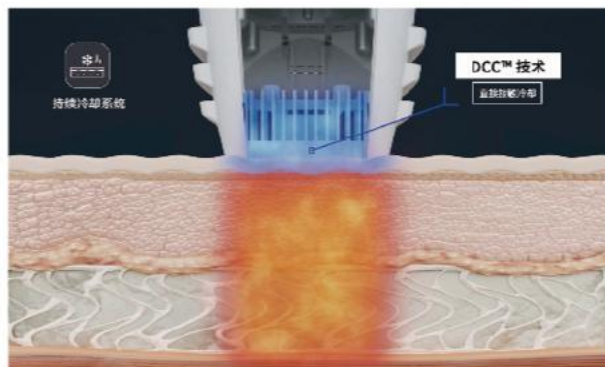

各种合适的 探头

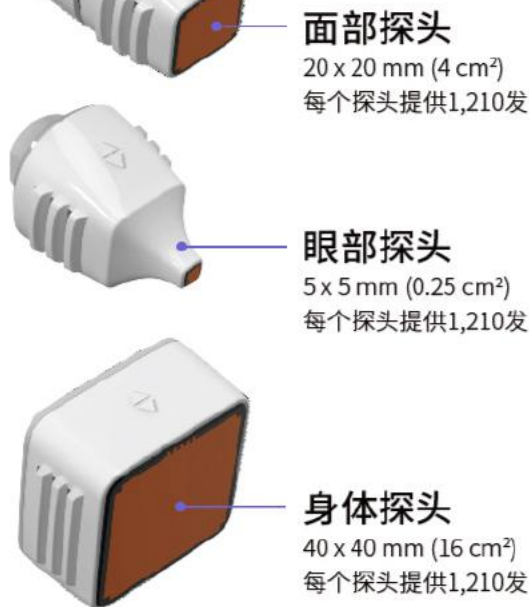

面部探头

20 x 20 mm (4 cm²)
每个探头提供1,210发

眼部探头

5 x 5 mm (0.25 cm²)
每个探头提供1,210发

身体探头

40 x 40 mm (16 cm²)
每个探头提供1,210发

简单直观 用户界面




- » 可调节的10级射频功率
- » 可调节的5级冷却温度
- » 显示每次发射的能量和总能量



- » 操作要点简单配置
- » 可调节音量
- » 提供锁屏
- » 提供的治疗史

技术 手柄

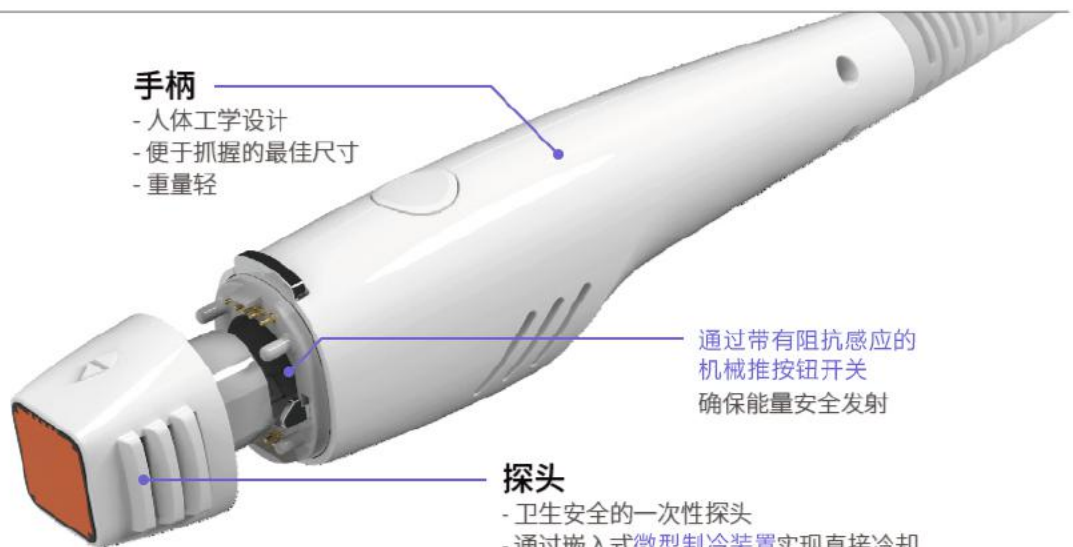

手柄

- 人体工学设计
- 便于抓握的最佳尺寸
- 重量轻

探头

- 卫生安全的一次性探头
- 通过嵌入式微型制冷装置实现直接冷却

Liberté 规格

型号	Liberté	
产品类型	单极射频	
频率	6.78 MHz	
阻抗范围	75 to 400 Ω	
探头	面部探头：	20 x 20 mm (4 cm ²)
	眼部探头：	5 x 5 mm (0.25 cm ²)
	身体探头：	40 x 40 mm (16 cm ²)
尺寸 (宽 x 深 x 高)	289.6 x 270 x 1154.7 mm	
重量	20 kg	
输入功率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	

* 待定，部分规格中的数值可能会根据认证的结果而有所调整。

* 使用前请阅读注意事项及说明。



韩国，专利证书（防过热皮肤护理设备）



键泰龙宇（上海）医疗科技发展有限公司

Jiantai Longyu (Shanghai) Medical Technology Development Co., Ltd.

上海市浦东新区芙蓉花路500弄17号501室

Room 501, Building 17, Lane 500, Furonghua Road, Pudong New Area, Shanghai

